


## Mode d'emploi

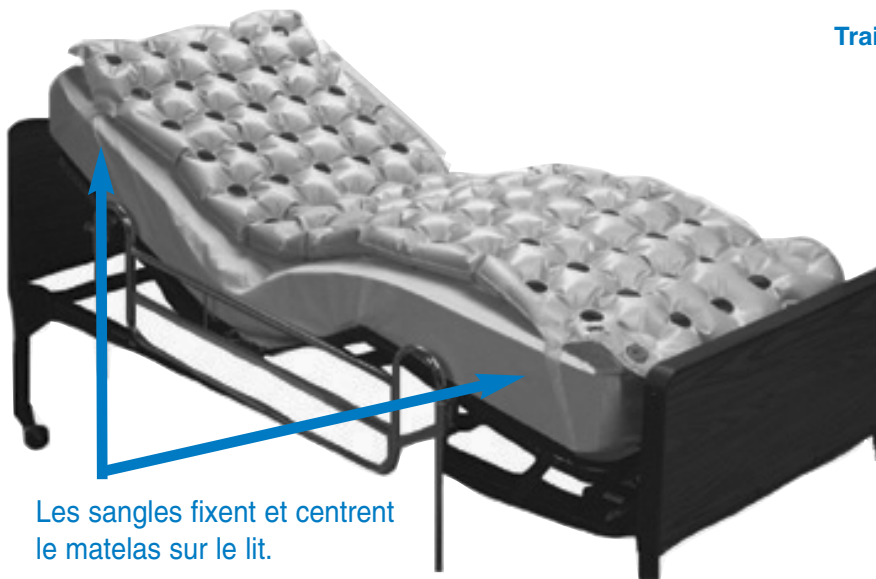

Les sangles fixent et centrent le matelas sur le lit.

**Traitement :** Nouvelle répartition des zones de pression, traitement de cicatrisation jusqu'au stade IV et aux escarres. Protection contre les lésions profondes des tissus.

**Prévention :** À utiliser par les patients à tous les niveaux de risques de plaies de pression.

**Confort :** À utiliser pour la gestion du remplacement de l'équipement habituel des hôpitaux et pour le confort des patients

**Échelle Braden :** Résultat  $\leq 18$  ou pour le confort.

**Échelle Norton :** Résultat  $\leq 16$  ou pour le confort.

### DÉPLIEZ

1.



La valve se trouve en haut et au pied du lit

### FIXEZ

2.



Tirez les courroies en dessous des coins

### GONFLEZ

3.



Ouvrez la valve transparente et introduisez la pompe

4.



Orientez la pompe vers la tête du lit et gonflez

5.



RETIREZ ET PUSSEZ POUR UN CYCLE COMPLET

### FERMEZ

6.



Bien fermez les valves

# Le surmatelas WAFFLE® fonctionne en appareil de mobilisation, rotation et transfert!

Pour la sécurité du patient et du personnel soignant

MOBILISATION



TRANSFERT



ROTATION



Ce produit peut être essuyé et nettoyé avec de l'eau savonneuse ou mélangée au désinfectant utilisé dans votre installation. Ne pas utiliser de solvants dégraissants contenant de l'alcool ou des distillats du pétrole.

Les points d'appui de forme ovale prévus pour les mains, aident les manipulations lors du déplacement et du transfert de patients pesant jusqu'à 300 lb.

## Vérifications à la main et réglages du gonflement

La clé du support sécurisé du patient est de créer un équilibre parfait entre la flexibilité et la raideur du matelas. Si un matelas est trop raide, les avantages offerts par la surface ne servent à rien. Deux centimètres et demi d'air sont suffisants pour soutenir le patient.

Si vous pouvez introduire et sortir votre main aisément, en la glissant sous le surmatelas, cela veut dire qu'il y a soulagement de pression. Bien que vous puissiez ressentir le contact du patient, votre main a déplacé l'air qui le supportait. L'objet de cette vérification à la main est de régler la quantité d'air dans le produit, si nécessaire. EHOB recommande des vérifications à la main quotidiennes, et ensuite d'ajouter ou de retirer de l'air, selon la position du patient et son type de corps.

Commandez en ligne à : [www.ehob.com](http://www.ehob.com)

**EHOB®**

Leader dans les appareils médicaux  
pour les soins aux patients

TROP GONFLÉ



On doit forcer pour plier en deux le surmatelas.

CORRECT



Le surmatelas se plie facilement en deux.

VÉRIFICATION À LA MAIN



La main devrait se glisser en dessous des fesses.

250 N. Belmont Avenue • Indianapolis, IN 46222 • [www.ehob.com](http://www.ehob.com)  
Courriel : [corporate@ehob.com](mailto:corporate@ehob.com) • Ph. 800.899.5553 • Fx. 317.972.4601

LMQC-0108-508